Módulos de imagen y visualización

Imaging Module 910

Módulo de imagen para lámpara compatible; confirmar configuración con ASEM.

Imaging Module 910 es el módulo Haag-Streit para documentar exploraciones con una BQ 900 compatible. No es una lámpara autónoma. Cámara, mando de captura y Connector Box forman una cadena utilizable de forma autónoma o con EyeSuite Imaging según configuración. Pantalla, lámpara, licencias y eventual estéreo 3D deben precisarse en el presupuesto ASEM; no se atribuye ninguna opción automáticamente al módulo estándar.



Imaging Module 910 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Captura asistida de imágenes

Exposición y diafragma automáticos facilitan la captura.

Requiere lámpara compatible

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Controles de cámara accesibles

Controles de cámara e iluminación junto al joystick.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Dos modos de integración

Funcionamiento autónomo o integración en EyeSuite.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Capturar una imagen fiel

El módulo documenta las observaciones de la lámpara de hendidura mediante una cadena de imagen específica.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Capturar en el momento adecuado

El modo de captura mantiene los controles de adquisición dentro del flujo de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Revisar y comparar

El modo de revisión organiza las imágenes para recuperar rápidamente las observaciones documentadas.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Función dirigida

Una solución diseñada para una necesidad clínica concreta.

Integración

El sistema complementa el conjunto de equipos existente.


Documentación

Los resultados útiles se incorporan al registro de la exploración.

Prestaciones en la práctica

Documentar la vista de la BQ 900

El módulo comparte la trayectoria óptica de la BQ 900 para obtener fotos y vídeos del examen. Es un accesorio de imagen, no una lámpara de hendidura autónoma.

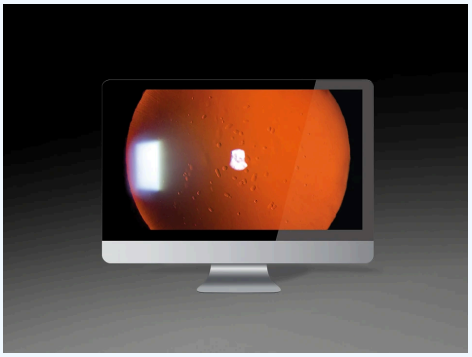

Imaging Module 910 · Captura del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Asistir la exposición y la selección

La exposición automática, el control de apertura y la selección de imágenes asisten la captura. La calidad de la imagen debe valorarla el profesional.

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Documentar la exploración sin sustituir la lámpara

Se integra en una BQ 900 compatible y comparte la vista del microscopio con la cadena de imagen. Las instrucciones identifican cámara CM04, mando RM03 y caja CB01. La iluminación LED compatible es un requisito que debe comprobarse. La foto muestra el módulo en su entorno óptico; las piezas de lámpara visibles no significan que se suministre la lámpara completa.

Fuentes y documentación

Connector Box y organización de imágenes

Almacenamiento CB01: 256 GB Interfaces CB01: HDMI / DisplayPort / LAN Red mínima EyeSuite: 1000BASE-T (1 Gbit/s) El modo de captura autónomo muestra la zona observada y la última imagen. El modo de revisión ordena cronológicamente las capturas. EyeSuite Imaging, historias clínicas y 3D dependen del sistema y licencias elegidos. Las indicaciones de gama no significan que todas las funciones estén activadas o disponibles en todos los países.

Fuentes y documentación


Disparar sin soltar el joystick

El módulo RM03 agrupa el disparo y los controles de iluminación delante del joystick. El selector de la trayectoria óptica permite devolver el 100% de la luz a los oculares.

Fuentes y documentación

Pasar de la captura a la revisión

El modo de captura muestra la zona observada y la última imagen. El modo de revisión recorre las imágenes de la sesión en orden cronológico.

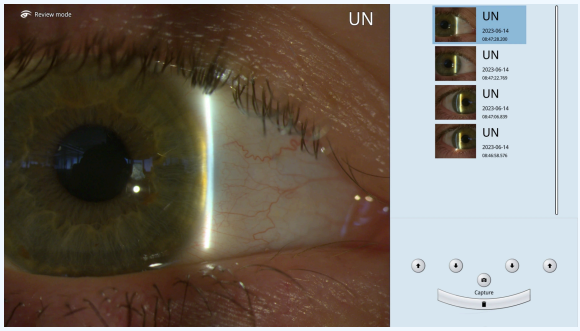

Imaging Module 910 · Captura del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Elegir funcionamiento autónomo o EyeSuite

CB01 permite mostrar la señal en un monitor sin EyeSuite. La ampliación EyeSuite Imaging y el procesamiento 3D son activaciones opcionales distintas.

Sin licencia 3D, el procesamiento sigue siendo 2D; comprobar las licencias ofrecidas.

Fuentes y documentación

Cámara y adquisición: datos documentados

Interfaz de cámara: CoaXPress CXP Frecuencia: 30 imágenes/s Foto: JPG Vídeo: MP4 En modo autónomo se permiten monitores FHD 1920 × 1080, QHD 2560 × 1440 y UHD 3840 × 2160. La visualización 4K se limita a 30 imágenes/s. Son resoluciones compatibles, no un monitor suministrado. El trayecto monocular utiliza el haz derecho; una configuración estéreo distinta usa ambos haces.

Fuentes y documentación

Instalación: dimensiones del módulo, no de la lámpara

Dimensiones de cámara CM04 (largo × ancho × alto): 173 × 127 × 82 mm Alimentación: 100–240 V AC Frecuencia: 50–60 Hz Las instrucciones indican 4,5 kg para el conjunto IM 910 con embalaje, no el peso neto del módulo o lámpara. El embalaje de 380 × 270 × 130 mm no representa el espacio óptico instalado. La cámara utiliza 24 V DC / 420 mA; CB01 tiene alimentación separada. Personal formado debe validar instalación y compatibilidad con ASEM.

Fuentes y documentación

Identificar el sistema compatible

Las instrucciones describen CM04, RM03 y CB01 para la BQ 900 con la iluminación LED adecuada. No se presupone intercambiable un módulo de otra lámpara o generación.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
Haag-Streit

Modelo
Imaging Module 910

Tecnología
Sistema clínico especializado

Uso clínico
Imagen y OCT · Diagnóstico y biometría

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 2,975 kB

Fuentes y documentación

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/E

nglish/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
Fuente comprobada el 2026-10-18

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Imaging Module 910

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Imaging Module 910?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/im910-ifu-original.pdf

Fuentes y documentación

¿A qué lámpara está destinado el IM910?

Las instrucciones indican un diseño exclusivo para la BQ 900, con la iluminación LED requerida.

Fuentes y documentación

¿El modo 3D está activo sin licencia?

No. Las instrucciones especifican procesamiento 2D sin licencia y 3D estereoscópico con la activación opcional correspondiente.

Fuentes y documentación

¿Se puede visualizar sin EyeSuite?

Sí. La Connector Box CB01 permite ver una señal directa en un monitor conectado sin EyeSuite.

Fuentes y documentación

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Imagen y OCT

Diagnóstico y biometría

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información

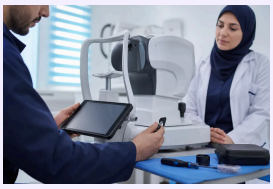


Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: b2908b27de55