Perimetría y campo visual

# Octopus 600

## Perímetro que combina perimetría estática SAP y Pulsar.

Características técnicas principales 1. Pruebas estándar de perimetría estática: • Pruebas de umbral blanco sobre blanco para el campo visual central. • Rapidez de las pruebas gracias a la estrategia TOP rápida: solo de 2 a 4 minutos para una prueba de umbral completa. • Biblioteca completa de pruebas para distintas necesidades clínicas: o Campo central: G, 32, 30-2, 24-2. o Pruebas maculares: M (basada en la fisiología) y 10-2. • Compatible con los formatos de impresión Octopus y HFA para una mayor flexibilidad clínica. 2. Cribado rápido y eficaz: • Prueba TPS (Tendency Perimetry Screening): o Distingue los campos visuales normales y anormales en menos de un minuto. o Alta fiabilidad al presentar estímulos específicos 3 veces para validar los resultados. • Perimetría Pulsar: o Detección precoz del glaucoma. 3. Análisis avanzado de los resultados: o Agrupa los defectos visuales siguiendo las fibras nerviosas de la retina. o Alta sensibilidad para detectar cambios glaucomatosos precoces. • Software EyeSuite — Análisis de progresión: o Detecta los cambios (localizados o difusos) y su velocidad. o Presenta resultados claros con gráficos y símbolos intuitivos. 4. Ergonomía e integración del software: • Software EyeSuite: o Centraliza los resultados de varios equipos Haag-Streit. o Integración completa con los sistemas EMR (historia clínica electrónica), sin software de terceros. • Equipo compacto y ligero, ideal para espacios reducidos. • Se integra fácilmente en consultas con un elevado volumen de pacientes. 5. Opciones flexibles de visualización de los datos: • Impresión estándar 7-en-1: presentación de los resultados en diferentes formatos clásicos y personalizables. • Visualización en red: acceso directo desde un ordenador mediante la conexión en red con EyeSuite.




Octopus 600 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto | Ver producto

Generado el 2026-11-10

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

# Ventajas principales

### Perimetría estática central

Pruebas de campo central con estímulos blanco sobre blanco.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

### Análisis global de progresión

Revisión de campos seriados y de su progresión global.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17


### Sin necesidad de sala oscura

Las exploraciones pueden realizarse fuera de una sala oscura.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

### Explorar el campo central

Los programas específicos organizan la evaluación del campo visual central.

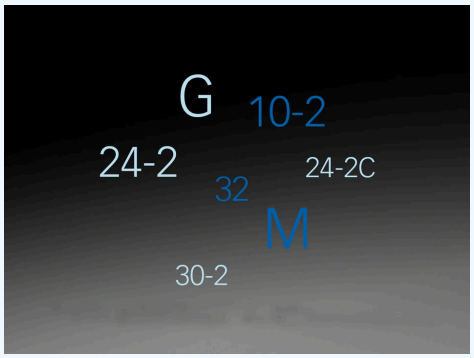


Octopus 600 · Esquema del fabricante


Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

### Realizar un cribado eficaz

El protocolo de cribado guía la adquisición y ofrece un resultado directamente utilizable.

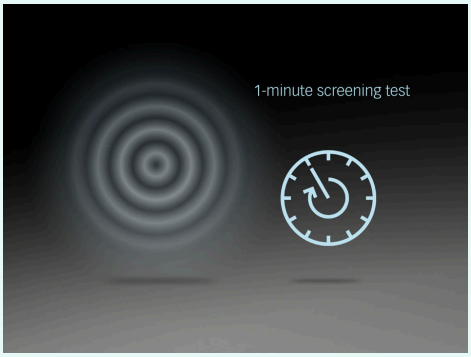


Octopus 600 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

### Documentar el seguimiento

La integración EyeSuite organiza los resultados para revisarlos y compararlos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

### Campo visual

Programas específicos para la evaluación funcional.

### Proceso guiado

La interfaz organiza las etapas de la exploración.

### Análisis del seguimiento

Los resultados ayudan a realizar comparaciones a lo largo del tiempo.

## Prestaciones en la práctica

### Perimetría estática SAP

Común a Basic / Pro; TOP SAP depende de la versión.

Fuentes y documentación


## Perimetría Pulsar

Común a Basic / Pro; TOP SAP depende de la versión.

Fuentes y documentación

### Medir el campo visual central

El Octopus 600 realiza perimetría estática blanco sobre blanco del campo central. Los programas G, M, 24-2 y 10-2 responden a distribuciones de puntos diferentes.

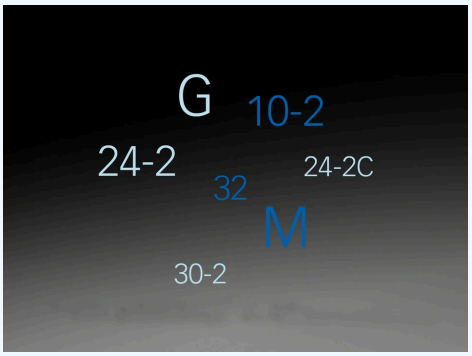


Octopus 600 · Esquema del fabricante


Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

### Distinguir cribado y umbral

El cribado rápido es cualitativo. El método Pulsar utiliza un estímulo de contraste y resolución variables; no sustituye a la perimetría estándar de seguimiento.

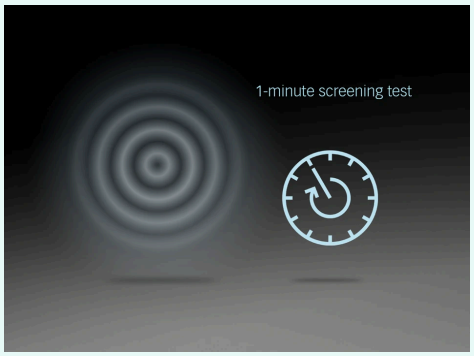


Octopus 600 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

## Control de fijación

Detecta automáticamente las pérdidas de fijación

Las pérdidas de fijación debidas a una escasa colaboración del paciente son una causa importante de campos visuales poco fiables. Con el control de fijación Haag-Streit, ya no es necesario preocuparse. El control interrumpe la prueba si la fijación es incorrecta y la reanuda automáticamente. Esto ayuda a asegurar que se explore cada punto del campo visual.

## Uso en entornos iluminados

o Equipado con una pantalla TFT que proyecta estímulos insensibles a la luz ambiental.
o Funciona de forma fiable fuera de una sala oscura, permitiendo una instalación flexible sin condiciones de iluminación específicas.

## Ergonomía y facilidad de uso

o Pulsador de respuesta ergonómico:
• Mejor respuesta sonora y mecánica.
• Diseño cómodo que permite responder en distintas posiciones.
o Flujo de trabajo guiado:
• Ayuda al examinador a seguir todas las etapas necesarias para realizar pruebas fiables.
• Reduce la curva de aprendizaje y mejora la calidad de los resultados.

## Posicionamiento más sencillo del paciente

o Lentes de prueba grandes:
• Facilitan el posicionamiento mediante un mecanismo de sujeción magnética.
o Oclusor translúcido:
• Bloquea los estímulos para el ojo cubierto y, al mismo tiempo, lo ilumina suavemente.
• Elimina la necesidad de un parche ocular, reduce el riesgo de cobertura incompleta y no requiere desinfección.
o Posición cómoda:
• Una postura ligeramente inclinada hacia delante y hacia abajo se percibe como más agradable.
• Mentonera opcional para mayor comodidad.

## Aplicaciones

• Ideal para consultas de atención ocular que necesitan un dispositivo compacto, fiable y fácil de usar.
• Diseñado para entornos en los que la facilidad de uso y la calidad de los resultados son prioritarias.

## Puntos fuertes

Cribado rápido:

Permite distinguir los campos visuales normales y anormales en menos de un minuto mediante la perimetría Pulsar.

Análisis avanzado del glaucoma:

Visualización de series de campos visuales desde distintos ángulos, con herramientas como el análisis de clústeres y el análisis polar para una comparación estructural.

Ergonomía y facilidad de uso:
Compacto y utilizable fuera de una sala oscura, permite un posicionamiento ergonómico del operador y del paciente.

Integración del software:
El software EyeSuite facilita la integración en los flujos de trabajo de las consultas médicas, con compatibilidad EMR y gestión centralizada de los datos.

# Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

## Supervisar la fijación y la posición


Blink Control y Pupil Position Control gestionan los parpadeos y descentrados. Dart Control y Contact Control completan la supervisión del ojo y de la posición del paciente.

Fuentes y documentación

## Leer una serie de campos

EyeSuite muestra campos individuales y progresión. Según la tabla actual, los análisis Cluster Trend y Polar Trend son estándar en Pro y opcionales en Basic.

Funciones según Basic/Pro y las opciones activadas.

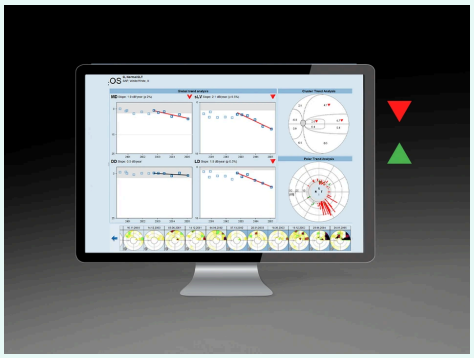

Octopus 600 · Informe del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

# Diseñado para la práctica diaria

## Trabajar sin sala oscura

La pantalla TFT permite el uso sin sala oscura en las condiciones previstas por el fabricante. La pantalla táctil, el pulsador de respuesta y las lentes de prueba acompañan el examen.

Fuentes y documentación

## Elegir las funciones del puesto

TOP, los análisis de tendencias, DICOM y el acceso a una base remota deben verificarse para Basic o Pro. No se declara ningún módulo de perimetría cinética para el 600.

Fuentes y documentación

# Especificaciones técnicas y documentación

### Marca
Haag-Streit

### Modelo
Octopus 600

### Tecnología
Perímetro

### Uso clínico
Diagnóstico y biometría

### Tamaños del estímulo
SAP Goldmann III · Pulsar 5°

Fuentes y documentación

### Campo máximo de exploración
30 °

Fuentes y documentación

### Conectividad
Ethernet · EMR

DICOM opcional, no se presupone incluido.

Fuentes y documentación


### Dimensiones
467 × 508 × 500 mm

Fuentes y documentación

### Peso
12.7 kg

Fuentes y documentación


DICOM opcional, no se presupone incluido.

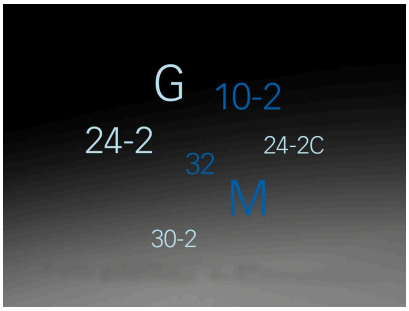


Octopus 600 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

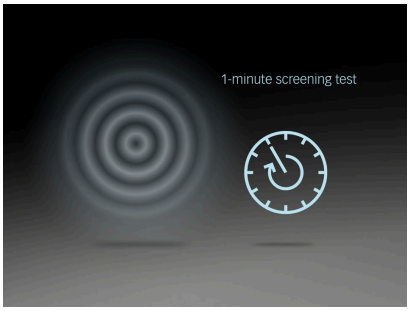


Octopus 600 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

# Descargas y recursos

- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20600/Brochures/English/HS_octopus_600_br_7220354_perimetry_simplified.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-600
  Fuente comprobada el 2026-10-18

# Sus preguntas sobre Octopus 600

### ¿Cuál es la Tamaños del estímulo documentada de Octopus 600?

SAP Goldmann III · Pulsar 5°

Fuentes y documentación

### ¿Cuál es la Campo máximo de exploración documentada de Octopus 600?

30 °

Fuentes y documentación

### ¿Qué configuración debo confirmar para Octopus 600?

DICOM opcional, no se presupone incluido.

Fuentes y documentación

### ¿El Octopus 600 realiza perimetría cinética?

No. La tabla Basic/Pro no declara un modo cinético para este modelo.

Fuentes y documentación

### ¿Un cribado rápido sustituye a un campo de umbral?

No. El cribado descrito es cualitativo; las pruebas de umbral y su interpretación siguen siendo distintas.

Fuentes y documentación

### ¿La estrategia TOP está incluida en todas las versiones?

La tabla actual la indica como opcional en Basic y estándar en Pro.

Fuentes y documentación

# Productos relacionados



## Octopus 900

Haag-Streit

Perimetría y campo visual

Perimetría estática; otras funciones dependen de la configuración.

Ver producto



## HVF-100

Huvitz

Perimetría y campo visual

Evaluación del campo visual con perimetría estática blanco sobre blanco.

Ver producto

# Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

# Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

### Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

### Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información

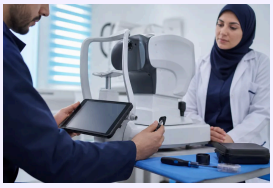


Ilustración del servicio

### Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

### Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 5c35920264d2