Щелевые лампы

Elara 900

Щелевая лампа с микроскопом Галилея и пятью увеличениями.

Совершенство Haag-Streit Сочетая легендарную оптику Haag-Streit и передовую эргономику, Elara 900 по-новому определяет стандарты офтальмологического обследования. Непревзойдённая клиническая визуализация: выявление малейших изменений благодаря исключительному светопропусканию и интегрированной надёжной точной оптике. Полный комфорт: эргономика для специалиста и улучшенный опыт пациента с меньшим зрительным утомлением и более быстрым обследованием. Упрощённая работа: интуитивное управление, мгновенные настройки и ежедневная экономия времени. Швейцарская надёжность: прочность, контроль качества и проверенная долговечность для интенсивной эксплуатации. Инвестиция в будущее: расширяемое устройство для технологических инноваций и будущих направлений офтальмологии. Elara 900: точность, комфорт и долговечность для обследований сегодня и завтра.



Elara 900 · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-11

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Проекционное щелевое освещение

Проекционное освещение для наблюдения структур глаза.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Инфракрасная оценка желёз

ИК-освещение для оценки мейбомиевых желёз.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Моторизованное управление исследованием

Моторизованная регулировка высоты и увеличения.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Оптика Haag-Streit

Оптическая система для подробного наблюдения переднего отрезка.

Контроль положения

Регулировки помогают поддерживать удобное положение в повседневной работе.

Удобство действий

Органы управления организованы вокруг клинического исследования.

Возможности на практике

Точное наблюдение

Оптическая система помогает подробно исследовать роговицу и передний отрезок.

Источники и документация

Выбор нужного угла

Конструкция рабочего места упрощает настройки, необходимые для наблюдения.



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация

Источники и документация

Управление освещением

Система освещения обеспечивает согласованные условия для клинической работы.



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация

Источники и документация

Освещение под задачу наблюдения

Проекторное освещение P-Type предлагает несколько цветов и цветовых температур. Моторизованный жёлтый фильтр дополняет настройки наблюдения.



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация

Источники и документация

Пять ступеней увеличения

Микроскоп Галилея обеспечивает 6.3×,10×,16×,25× и 40×. Моторизованное увеличение управляется джойстиком.



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация

Источники и документация

Новый взгляд на щелевую лампу

Превосходная клиническая визуализация — уверенно различайте каждую деталь

Швейцарская надёжность

Возможности расширения — разработано для сегодняшних и будущих задач

Работать рациональнее.

Автоматические режимы и оптимизированная эргономика для максимального комфорта врача и пациента.

Для более удобного рабочего процесса

Вызов сценария исследования

Предустановки объединяют освещение, фильтр, щель и увеличение. Колесо вызывает сценарий без повторения каждой ручной настройки.



Elara 900 · Вид оборудования

Источники и документация

Источники и документация

Регистрация и организация материалов

Прибор регистрирует изображения и видео через свой интерфейс. Передача в EyeSuite или карту пациента DICOM зависит от выбранной среды и лицензий.

Подключение DICOM требует лицензии; предлагаемую интеграцию необходимо уточнить.

Источники и документация

Для повседневной практики

Настройка положения у прибора

Моторизованная высота, наклонные окуляры и регулируемая подбородочная опора помогают позиционированию. Основные органы управления сгруппированы вокруг джойстика.

Источники и документация



Elara 900 · Вид оборудования

Источники и документация

Определение визуализации и тонометрии

Для стереоскопической регистрации 3D требуется соответствующая лицензия. Для тонометрии Гольдмана необходим совместимый AT 900 typeR, добавленный к щелевой лампе.

Опции и региональную доступность необходимо уточнить; включение принадлежностей в комплект не предполагается.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
Haag-Streit

Модель
Elara 900

Технология
Щелевая лампа

Клиническое применение
Диагностика и биометрия

Увеличения
6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

Источники и документация

Количество увеличений
5

Источники и документация

Оптика микроскопа
По схеме Галилея

Источники и документация

Размеры
560 × 401 × 330 mm

Источники и документация

Масса
15.2 kg

Источники и документация



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация



Elara 900 · Деталь устройства

Источники и документация

Загрузки и материалы

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamps
  Источник проверен 2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/Campaigns/elara/900
  Источник проверен 2026-10-17
- https://us.haag-streit.com/Campaigns/elara/900
  Источник проверен 2026-08-30
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/a-superior-clinical-view-uniq-68bfd159b9f2e
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/a-superior-clinical-view-uniq-68bfd159b9f2e
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/optimized-ergonomics-uniq-68b8798975362
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  Источник проверен 2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Elara 900

Какова документально подтверждённая характеристика «Увеличения» для Elara 900?

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Количество увеличений» для Elara 900?

5

Источники и документация

Включена ли визуализация 3D по умолчанию?

Нет. Производитель указывает лицензию 3D; предлагаемая конфигурация должна её обозначать.

Источники и документация

Требует ли подключение DICOM лицензии?

Да. Производитель связывает интеграцию рабочего списка DICOM с соответствующей лицензией Connectivity.

Источники и документация

Какой тонометр Гольдмана указан для Elara 900?

Производитель указывает AT 900 typeR; его включение необходимо оговорить в поставке.

Источники и документация

Связанное оборудование




BI 900

Haag-Streit

Щелевые лампы

Щелевая лампа с микроскопом Кеплера, двумя увеличениями и LED-освещением.

Посмотреть изделие

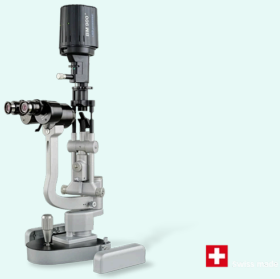

BM 900

Haag-Streit

Щелевые лампы

Щелевая лампа с микроскопом Кеплера и увеличениями 10× и 16×.

Посмотреть изделие



BQ 900

Haag-Streit

Щелевые лампы

Щелевая лампа с микроскопом Галилея, пятью увеличениями и LED-освещением.

Посмотреть изделие



HS-5000

Huvitz

Щелевые лампы

Щелевая лампа с башенной осветительной системой и оптикой Галилея.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Диагностика и биометрия

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее

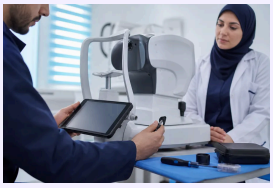


Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: fb83517aa8a5